

SOFTSTAND



BRUKSANVISNING



WWW.ERGOSEAT.NO

BRUKSANVISNING SOFTSTAND

Gratulerer med et ståstativ fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med produktet og funksjonaliteten enten du er bruker, assistent, forelder, eller terapeut. Det er viktig at du setter deg inn i den bruksanvisningen før dette produktet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god å sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

Produkt :	Ansvarlig terapeut
_____	_____
Spesialtilpasset til	HMS
_____	_____
Tilbudsnr	Leveringsdato
_____	_____



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på www.ergoseat.no



TEKNISK DATA

Ståstativet er laget for brukere med store skjevstillinger og der kravene til komfort, enkel rengjøring, stabilitet og slitestyrke er ivaretatt.

Avtrykket til skumpute ble gjort under en konsultasjon i samråd med kvalifisert personell.

Ståstativet er utviklet for å gi alle brukere en optimal stilling. Stativet har individuell fotjustering. I tillegg til å gi et nettere uttrykk og begrense størrelsen på stativet når det ikke er i bruk.

Teknisk data				
Variabel	FE4	FE32	DE4	DE10
Brukervekt maks kg*	80	80	80	80
Brukers høyde				
Lengde cm*	110	110	110	110
Bredde cm*	70	70	70	70
Høyde i horisontal posisjon	80	80	80	80
Høyde i vertikal posisjon (Uten nakkestøtte)	-	-	-	-
Egenvekt understell kg*	30	30	30	30
Vinkeljustering av fotstøtte°	+-10°			

MODELLER



FE4

Frontalt ståstativ med elektrisk til og 4stk 4``svingbare hjul med brems.



FE4

Frontalt ståstativ med elektrisk tilt og 32``drivhjul, 4 stk 4``støtthjul med brems.



FE4


Dorsalt ståstativ med elektrisk tilt og 4stk 4``svingbare hjul med brems.



FE4

Dorsalt ståstativ med elektrisk tilt og 10``hjul bak, 6.5``hjul med sving foran.

FUNKSJONSOVERSIKT

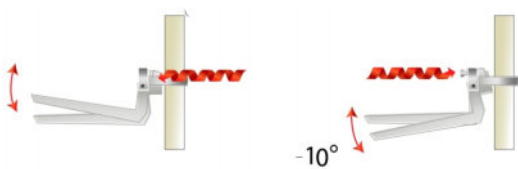

Justering av fotvinkel


POSISJONERING

1.SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene er låst, og at stativet står stødig.


2.LØSNE HOFTEBELTE OG TILT BAKOVER

Tilt stativet bakover og løsne hoftebelter, knestoppere og brystbelte slik at de henger ut på hver side.

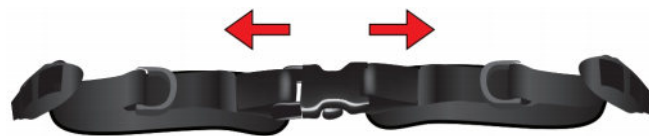


3.PLASSER BRUKER

Det er viktig at bruker blir riktig plassert i ståstativ. Ved bruk av seil prøv å senke personen som anvist. Vær helst to personer ved forflytning. Forsøk å justere personen inn i stativet til du er sikker på at **korrekt posisjon er oppnådd.**

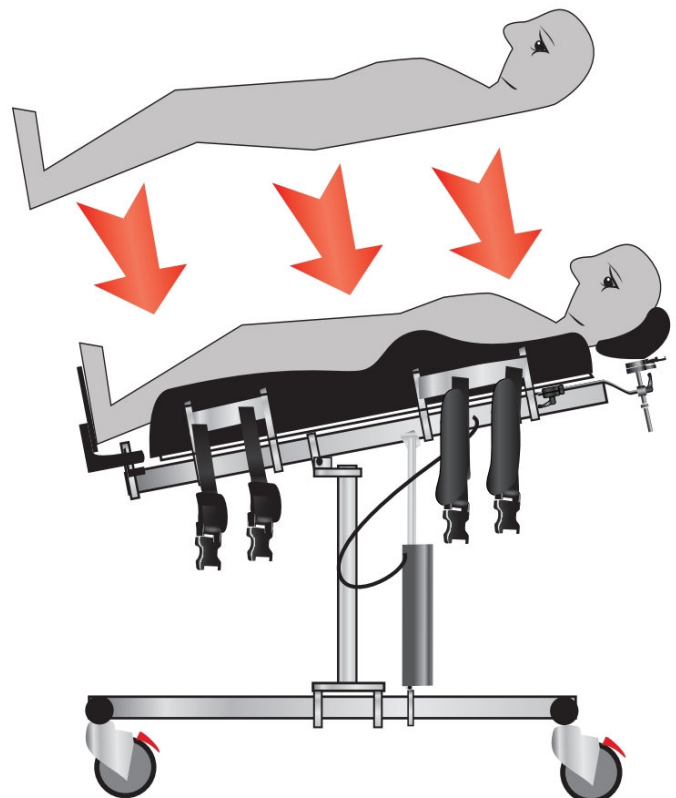

4.POSISJONER BELTER

Belter og vester festes og strammes på de anviste steder.

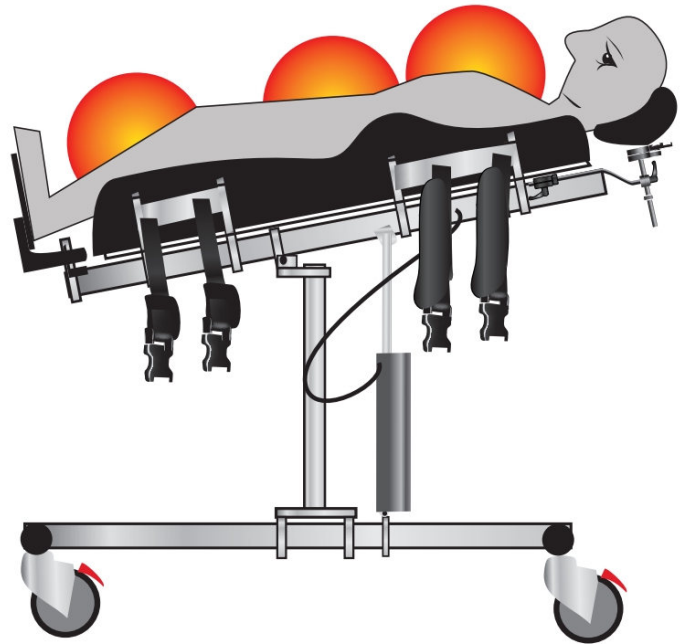


5.STRAMMING AV BELTER



6.TILT BRUKER I RIKTIG POSISJON

Posisjon og varighet i stående stilling varierer mye fra bruker til bruker.

Undersøk alltid med terapeut hvor lang ståfrekvens bruker har og tilpass til dette.

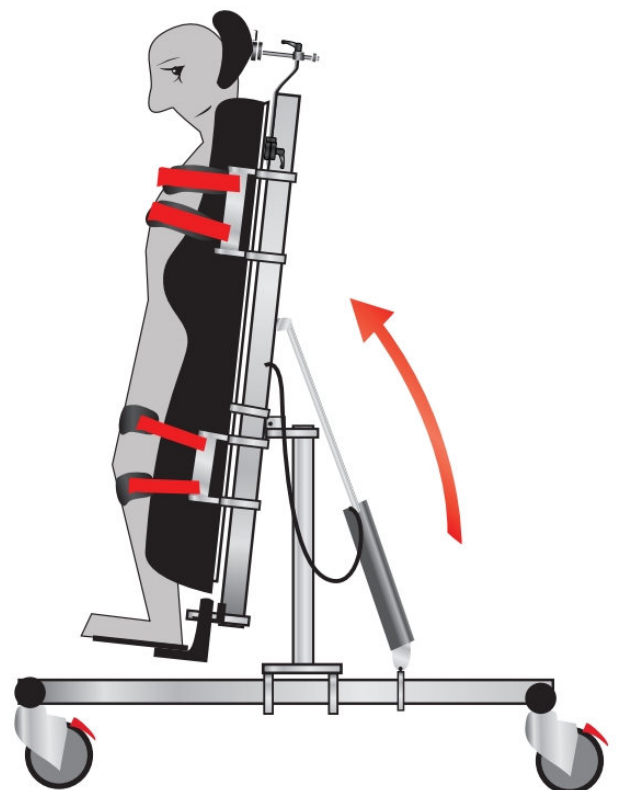

VEDLIKEHOLDSANVISNING

KONTROLL AV SLITASJE

Kontroller alltid festepunkter, fiksering- og posisjoneringsbånd for slitasje før anvendelse.

Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armen, fotbrett mm) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

ETTERTILPASNING

Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i puten. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

ERSTATNINGSPUTER OG TREKK

Erstatningsputer vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon av Ergoseat, og vil være en kopi av original pute. Dersom det blir behov for erstatningstrekk kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatningstrekk vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon og vil være kopi av originalt trekk.

RENGJØRINGSRUTINER

DAGLIG RENHOLD

Løs smuss tørkes normalt av puten med en varm fuktig klut. Se ellers anvisning på trekkets vaskelapp.



STOFFTREKK TIL PUTEN

Softstand har et avtagbart stofftrekk for å gjøre det enklere å rengjøre.

